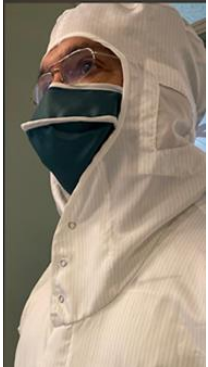


<p>MYCROCLEAN ITALIA SRL +39-0295300368 info@myroclean.com Rev.6</p>	<p align="center">INFORMAZIONI TECNICHE</p> <p align="center">mascherina lavabile di tipo II ad uso medicale</p> <p align="center">FILTRAZIONE BFE Capacità filtrazione batterica (BFE) : 99,8%</p> <p align="center">La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto a destra Parte piccola sul naso, parte grande sotto</p>	<p>CODICE BP2020V3</p> 
--	---	--

1 – Descrizione prodotto e destinazione d’uso

Mascherina lavabile, in tessuto 99% poliestere e 1% fibra di carbonio, destinata alla protezione di naso e bocca. Articolo prodotto in accordo all'art. 15 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n°18

2 - Classificazione

Le mascherine della serie BP2020V3 sono classificate di Tipo II, secondo la norma UNI EN 14683:2019.

3 – Caratteristiche

Il dispositivo, costituito da uno strato, è lavabile in lavatrice fino a 60°C (il tessuto resiste fino a 150°C)

Filtrazione Particellare (%) 0.3 µm 0.5 µm

Tessuto risultato **NON CITOTOSSICO**, da test effettuato su fibroblasti, secondo la norma UNI EN ISO 10993-5.

Filtrazione BFE

BFE = 99,8 % (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019)

Carico Biologico

UFC < 30 UFC (dai test di laboratorio effettuati in conformità alla norma UNI EN 14683:2019)

Permeabilità all’aria (cm² /cm³/sec) ASTM E96 (Conosciuto anche come ISO - 11092 o test Ret o Hohenstein)

Il risultato ottenuto sulle mascherine serie BP2020 è di 7,5 quindi buono o molto traspirante

4 – Modalità d’uso e avvertenze

Manipolare con mani pulite e igienizzate, facendo aderire bene la mascherina al viso, nella giusta posizione, ovvero con la parte più piccola verso il naso, e quella più grande su bocca e mento.

NON MODIFICARE LA MASCHERINA; NON TAGLIARE GLI ELASTICI; INDOSSARE AL DIRITTO (come indicato in figura) - ***In caso contrario la mascherina perde la sua funzione protettiva.***

5 - Lavaggio

A mano o in lavatrice, con detersivo, fino a 60°C. **NON USARE CANDEGGINA**

Rispettando le indicazioni di uso e manutenzione, il prodotto mantiene le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fino a 500 lavaggi

6 - Smaltimento

Mascherina da smaltire come RSU (a meno che non sia stata contaminata, nel qual caso deve essere smaltita come “rifiuto speciale”). La busta esterna viene smaltita come plastica.

7 - Azienda

MYCROCLEAN ITALIA SRL

Via Carlo Porta, 14 20064 Gorgonzola

+39-0295300368 -e-mail: info@myroclean.com

Myroclean srl è dotata di un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015